

[LEXIMI I REZULTATEVE]

Ju lutemi të shikoni ilustrimin dhe të krahasoni intensitetin e vijës T me kartën e ngjyrave për Vitaminën D.

Niveli i 25-OH Vitaminës D	Intervali i referencës (ng/mL)	Intervali i referencës (nmol/L)
I mangët	0 – 10	0 – 25
I pamjaftueshëm	10 – 30	25 – 75
I mjaftueshëm	30 – 100	75 – 250



I MANGËT: Shfaqen dy vija të ngjyrosura. Njëra është në zonën e kontrollit (C) dhe tjetra duhet të jetë në zonën e testimit (T). Vija në zonën e testimit (T) ka një intensitet të barabartë ose është më e errët sesa vija për 10 ng/mL sipas kartës së ngjyrave të përfshirë në paketim.



I PAMJAFTUESHËM: Shfaqen dy vija të ngjyrosura. Njëra është në zonën e kontrollit (C) dhe tjetra duhet të jetë në zonën e testimit (T). Vija në zonën e testimit (T) është më e errët sesa vija për 30 ng/mL sipas kartës së ngjyrave të përfshirë në paketim, por më e hapet sesa vija për 10 ng/mL sipas kartës së ngjyrave të përfshirë në paketim.



I MJAFTUESHËM: Shfaqen dy vija të ngjyrosura, njëra shfaqet gjithmonë në zonën e kontrollit (C), ndërsa vija tjetër e zbehtë shfaqet në zonën e testimit (T). Vija në zonën (T) ka një intensitet të barabartë ose është më e hapet sesa vija për 30 ng/mL sipas kartës së ngjyrave.



I TEPËRT: Një vijë e ngjyrosur shfaqet në zonën e vijës së kontrollit (C). Nuk shfaqet asnjë vijë e ngjyrosur në zonën e vijës së testimit (T). Nëse rezultati është i tepërt, ju rekomandojmë të konsultoheni me një mjek.



I PAVLEFSHËM: Vija e kontrollit nuk shfaqet. Sasia e pamjaftueshme e mostrës dhe teknikat e gabuara për kryerjen e testit janë arsye të mundshme për mosshfaqjen e vijës së kontrollit. Rishikoni procedurën dhe përsëritni testin me një test të ri. Nëse problemi vazhdon, ndërprini menjëherë përdorimin e kompletit të testimit dhe kontaktoni shpërndarësin tuaj lokal.

[PROCEDURA E KONTROLLIT]

Testi përfshin një procedurë kontrolli. Vija e ngjyrosur që shfaqet në zonën e kontrollit (C) është kontrolli i brendshëm i procedurës. Ajo konfirmon që sasia e mostrës është e mjaftueshme dhe që teknika e procedurës është e saktë.

[KUFIZIMET]

- Kaseta e testimit të shpejtë të vitaminës D siguron vetëm një rezultat analitik gjysmë-sasiore. Për të konfirmuar rezultatin duhet të përdoret një metodë analitike sekondare.
- Është e mundur që gabimet teknike ose procedurale, si edhe prania e substancave të tjera interferuese në mostrën e gjakut të plotë të shkaktojnë rezultate të gabuara.
- Ashtu siç ndodh me të gjitha testet diagnostikuese, rezultatet duhet të merren parasysh së bashku me informacione klinike të tjera në dispozicion të mjekut.
- Teste klinike të tjera janë të nevojshme në qoftë se rezultatet janë të diskutueshme.

[KARAKTERISTIKAT E PERFORMANCËS]

Saktësia

Një vlerësimi klinik është kryer, duke krahasuar rezultatet e një testi laboratorik të vitaminës D me rezultatet e marra me anë të Testit të Shpejtë të Vitaminës D, me qëllim për të vërtetuar Testin e Shpejtë të Vitaminës D. Testimi klinik i brendshëm ka përfshirë 90 mostra gjaku të plotë. Rezultatet tregojnë një saktësi të përgjithshme prej 94,4%.

Metoda	Pajisja parashikuese (Testi i shpejtë i vitaminës D)	Rezultati total		
		I mangët	I pamjaftueshëm	I mjaftueshëm
Kaseta e testimit të shpejtë të vitaminës D (gjak i plotë)	I mangët	4	3	0
	I pamjaftueshëm	0	53	2
	I mjaftueshëm	0	0	28
	Rezultati total	4	56	30
Saktësia	>99.9%	94.6%	93.3%	94.4%

[PYETJE TË SHPESHTA]

- SI FUNKSIONON KASETA E TESTIMIT TË SHPEJTË TË VITAMINËS D?**
Në mjekësi, 25-hidroksi-vitaminë D është forma kryesore e magazinimit të vitaminës D në trup. Për këtë arsye, statusi i përgjithshëm i vitaminës D mund të përcaktohet duke zbuluar përmbajtjen e 25-hidroksi-vitaminës D. Nivelet më i vogla se 30 ng/mL, në rast të një rezultati pozitiv, tregojnë mungesën ose pamjaftueshmërinë e vitaminës D. Në këto raste mund të rekomandohen shtojca ushqimore me vitaminë D.
- KUR DUHET TË PËRDORET TESTI?**
Përdorimi klinik i testit 25-hidroksi-vitaminë D ka të bëjë kryesisht me diagnostikimin, trajtimin dhe monitorimin e rakitit (te fëmijët), osteomalacisë, osteoporozës postmenopauzale dhe osteopatisë renale. Mungesa e vitaminës D është e lidhur edhe me shumë sëmundje të tjera, duke përfshirë kancerin, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet autoimmune, diabetin dhe depresionin. Monitoroni nivelet tuaja të vitaminës D për të përcaktuar nëse duhet të merrni shtojca ushqimore me vitaminë D. Kaseta e testimit të shpejtë të vitaminës D mund të përdoret në çdo kohë të ditës.
- A MUND TË JETË REZULTATI I PASAKTË?**
Rezultatet janë të sakta nëse udhëzimet ndiqen me kujdes. Megjithatë, rezultati mund të jetë i pasaktë nëse kaseta e testimit të shpejtë të vitaminës D laget para kryerjes së testit ose nëse sasia e gjakut e aplikuar në pus nuk është e mjaftueshme, ose nëse numri i pikave të buferit është më pak se 2 ose më shumë se 3. Pikatorja kapilare e furnizuar në kuti ju mundëson të siguroheni që sasia e gjakut të mbledhur është e saktë. Përveç kësaj, ekziston mundësia e rezultateve të rreme në raste të rralla, si pasojë e parimeve imunologjike të përfshira. Në rast të testeve të tilla në bazë të parimeve imunologjike, rekomandohet gjithmonë që të konsultoheni me mjekun.
- SI TË INTERPRETOHET TESTI NËSE NGJYRA DHE INTENSITETI I VIJAVE JANË TË NDRYSHME?**
Ju lutemi të shikoni ilustrimin dhe të krahasoni intensitetin e vijës T me kartën e ngjyrave për Vitaminën D, e cila është furnizuar me kompletin.
- NËSE E LEXOJ REZULTATIN PAS 20 MINUTASH, A DO TË JETË I BESUESHËM?**
Jo. Rezultati duhet të lexohet brenda një afati prej 10 minutash pasi të keni shtuar buferin. Rezultati nuk është i besueshëm pas 20 minutash.
- ÇFARË DUHET TË BËJ NËSE REZULTATI ËSHTË I MANGËT OSE I PAMJAFTUESHËM?**
Nëse rezultati është i mangët ose i pamjaftueshëm, kjo do të thotë që niveli i vitaminës D në gjak është më pak se 30ng/mL dhe se duhet të konsultoheni me një mjek dhe t'i tregoni rezultatin e testit. Mjeku do të vendosë nëse duhet të kryeni një analizë shtesë.
- ÇFARË DUHET TË BËJ NËSE REZULTATI ËSHTË I MJAFTUESHËM?**
Nëse rezultati është i mjaftueshëm, kjo do të thotë që niveli i vitaminës D është i barabartë ose më i lartë se 30ng/mL, domethënë që është brenda intervalit normal. Një rezultat i tillë nuk përjashton mundësinë e toksicitetit të vitaminës D (hiperkalcemisë), megjithëse kjo situatë është shumë e rrallë. Sidoqoftë, nëse simptomat vazhdojnë, ju rekomandojmë të konsultoheni me një mjek.

[BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFI]

- Holick MF (March 2006). High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. *Mayo Clinic Proceedings*. 81 (3): 353–73.
- Eriksen EF, Glerup H (2002). Vitamin D deficiency and aging: implications for general health and osteoporosis. *Biogerontology*. 3 (1-2): 73–7.
- Grant WB, Holick MF (June 2005). Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: a review. *Alternative Medicine Review*. 10 (2): 94–111.

[INDEKS SIMBOLA / INDEKSI I SIMBOLEVE]



Proizvodač
Prodhuesi



Ovlašćeni zastupnik
Përfaqësuesi i autorizuar



Kataloški broj
Numri i katalogut



Batch code
Kodi i grupit



Koristiti po datumu
Data e përdorimit



CE oznaka
Shënimi CE



Sadržaj dovoljno za <n> testove
Përmban mjaftueshëm për <n> teste



In vitro dijagnostički medicinski uređaj
Pajisje mjekësore diagnostikuese in vitro



Temperaturna granica
Kufiri i temperaturës



Pogledajte uputstva za upotrebu
Konsultohuni me udhëzimet për përdorim



Nemojte ponovo koristiti
Mos e ripërdorni



Ne koristite ako je pakovanje oštećeno
Mos e përdorni nëse paketimi është i dëmtuar



Green Dot
Pika e Gjelbër




Kartica se može reciklirati
Karta e riciklueshme



Papir koji se može reciklirati
Letër e riciklueshme



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn
Email: info@alltests.com.cn

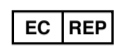


MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

LANCET / LANCET



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No. 1388 Cangxing Street,
Cangqian Community,
Yuhang District,
Hangzhou City, 311121
Zhejiang, China

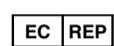


MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstr. 80 66386
St. Ingbert,
Germany

ILI / OSE



Ningbo Medsun Medical Co.,Ltd.
No. 55 Jinxi Road,
Zhenhai 315221
Ningbo P.R. China

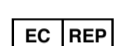


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537
Hamburg,
Germany

ALKOHOLNA PODLOGA / PLLAKË ALKOOLI



Jiangsu Sunclean Medical Co., Ltd.
No. 11 Fenghuang South Road,
Hutang Town,
Wujin District, 213162
Changzhou City,
Jiangsu Province,
P.R. China

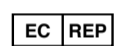


Medpath GmbH
Mies-van-der-Rohe
Strasse 8, 80807
Munich,
Germany

ILI / OSE



Ningbo Medsun Medical Co.,Ltd.
No. 55 Jinxi Road,
Zhenhai 315221 Ningbo
People's Republic of China

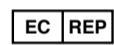


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537
Hamburg,
Germany

GIPS / SUVA



Ningbo Tianbo First Aid Product Co., Ltd.
Yushan Tou village, Dongqiao Town
315156 Yinzhou, Ningbo
People's Republic of China

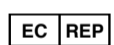

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56,
40239
Duesseldorf
Germany



OVD-402H

2024-05-15